

MTA系覆髄+裏層材
D-キャビオス®MTA

新発売記念キャンペーン

特別価格



ネオホワイトピュア® 配合

D-Cavios® MTA

覆髄+裏層 2in1

期 間 2023年 2月21日~4月20日

数量限定 予定数量に達し次第、期間中でも終了する場合がございます。

DirectCapping+BaseLiner CAVIOS with MTA

D-キャビオス®MTA


医療機器認証番号 304ADBZX00054000
歯科用覆髄材料(歯科裏層用高分子系材料)
管理医療機器

1.5g入シリンジ 1本

先端チップ 15本

デンティンブリッジ形成促進

光重合レジン基材としながら、その硬化物は水分との接触によりカルシウム溶出、ALP活性至適pH、HAP析出などMTA系成分の効果発現を促す独自処方を採用、デンティンブリッジの形成を促します。

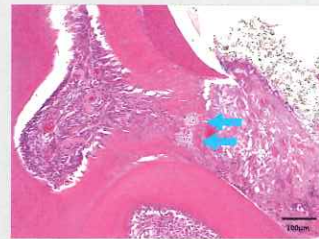

病理組織像

被蓋硬組織(青矢印)が形成され歯髄が保持されている。

※直接覆髄14日目(ラット)
【写真提供 松本歯科大学 病理学講座】

マイクロシール効果

D-キャビオス®MTA硬化物表面には経時的にHAP(ハイドロキシアパタイト)が析出し、付加的なシール効果を生じます。



析出したHAPのSEM像 [3,000倍]

低重金属、低細胞毒性、酸化ビスマス非配合

ポルトランドセメントは鉱物由来のため不純物排除が難しいと言われています。D-キャビオス®MTAはMTA系成分として「ネオホワイトピュア®」を採用することにより、低重金属を実現しました。また、酸化ビスマス非配合に加え、製材自体の細胞毒性が低く、直接覆髄にふさわしい生体適合性の高い処方となっています。

日本歯科評論 2023年2月号掲載記事

「MTA系光重合覆髄材
D-キャビオス®MTA」

清野栄治先生 清野歯科医院

別刷りあります。弊社営業部までご請求ください。

1本で裏層まで可能な工学的性質*

曲げ強さ 67 MPa
圧縮強さ 176 MPa

X線造影性 1.6mm
光硬化深さ 650mW/cm² 10秒 → 1.1mm
1200mW/cm² 5秒

*社内データ


組成

ウレタンジメタクリレート
ポルトランドセメント
硫酸バリウム
カンファークノン
その他

補充用
ネオ ブラックチップ(M) 30本
標準価格 2,000円
一般医療機器
医療機器届出番号 13B1X00154000014
別売
ネオ ブルーチップ(S) 40本
標準価格 2,000円
一般医療機器
医療機器届出番号 13B1X00154000016

MTA系覆髄+裏層材 D-Cavios® MTA

ネオホワイトピュア®配合

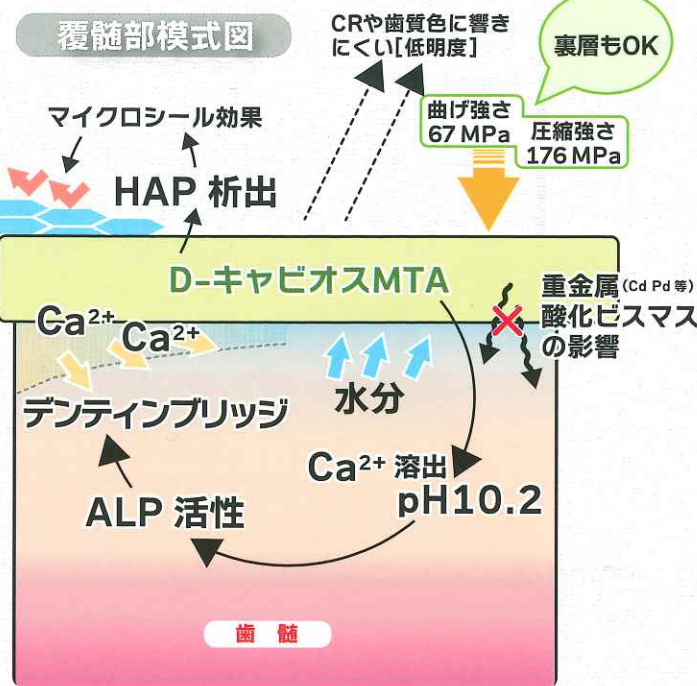

NEW

MTA系覆髄+裏層材 D-Cavios® MTA

ネオホワイトピュア®配合

新発売記念キャンペーン

包装
1.5g入シリンジ 1本
先端チップ 15本

標準価格
6,500円


が

おトク!
特別価格に

- 1本で直接覆髄から裏層まで
- デンティンブリッジ形成促進
- ALP活性に最適なpH
- HAPによるマイクロシール効果
- ネオホワイトピュア®配合

MTA系成分として「ネオホワイトピュア®」を採用した光重合覆髄+裏層材「D-キャビオス®MTA」。新発売キャンペーンとして、特別価格でのご提供を行っています。2in1の利便性と経済性をこの機会に是非ご検討ください。

覆髄と裏層を1本化、チェアタイムの短縮と省スペースでシンプルな治療を実現します。

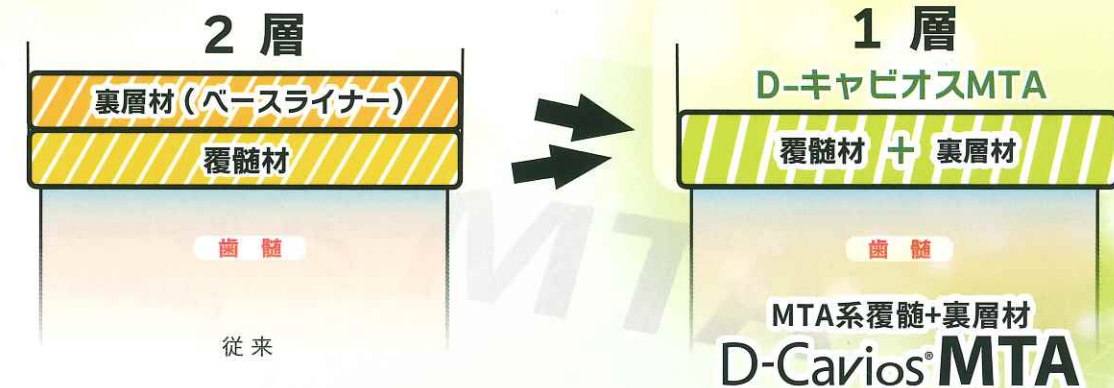

注文書

※必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店様にお渡しください。

D-キャビオス®MTA 新発売記念キャンペーン

貴医院名

セット

DirectCapping+BaseLiner CAVIOS with MTA

ネオ製薬ホームページ 最新の製品情報を掲載 <https://www.neo-dental.com/>

販売店名

製造販売業者

ネオ製薬工業株式会社

〒150-0012 東京都渋谷区広尾3丁目1番3号
Tel. 03-3400-3768(代) Fax. 03-3499-0613

お問い合わせ ☎ 0120-07-3768

ネオ製薬工業株式会社